

GESKE Hydrodermabraze – přístroj na černé tečky 8v1 – Aqua-Stream Face Cleanser

Funkce produktu:

- Hlubkově čistí póry
- Zajišťuje výživu pleti
- Vyhlazuje a zpevňuje pleť
- Má omlazující účinek
- Stimuluje mikrocirkulaci
- Odstraňuje make-up
- Redukuje mastnotu a kontroluje lesk
- Pečuje o citlivou pleť

GESKE Vakuový čistič pleti s hydrodermabrazí na černé tečky

- 1 Hydrodermabraze pro odstranění odumřelých kožních buněk (exfoliace)
- 2 Profesionální hloubkové čištění pórů (černých teček) vodním proudem
- 3 AirPulse Suction čistí póry jemným, ale účinným sáním (podtlakem)
- 4 Urychluje regeneraci pleti a dodává jí jasný svěží vzhled
- 5 Redukce zarudnutí a suché pokožky díky regenerační hydra technologii
- 6 Baterie s dlouhou výdrží a magnetickým nabíjecím kabelem




Hydratace, regenerace a hloubkové čištění pleti během několika minut s profesionálními výsledky

Popis produktu: Aqua-Stream Hydrodermabraze na obličej 8v1 je inovativní kosmetický přístroj, který kombinuje 8 funkcí pro dokonalé ošetření pleti. Tento přístroj poskytuje důkladné a jemné čištění, zatímco stimuluje mikrocirkulaci pleti, což pomáhá zlepšit vzhled a zdraví vaší pokožky.

Technologie: Přístroj využívá pokročilou ultrazvukovou technologii k odstranění nečistot a mastnoty z pórů. Tato technologie je šetrná k citlivé pokožce a zároveň velmi efektivní při zlepšování celkového vzhledu obličeje.



-  Skenování pleti aplikací v telefonu & osobní průvodce péčí o pleť
-  Odsávání nečistot z pórů pulzním podtlakem
-  Hlubokové hydratační čištění pleti vodou
-  Technologie prevence nečistot
-  Efektivní odstranění černých teček
-  Redukce zarudnutí a suché pokožky
-  Intenzivní hydratace pleti
-  Odstranění odumřelých kožních buněk vodním proudem

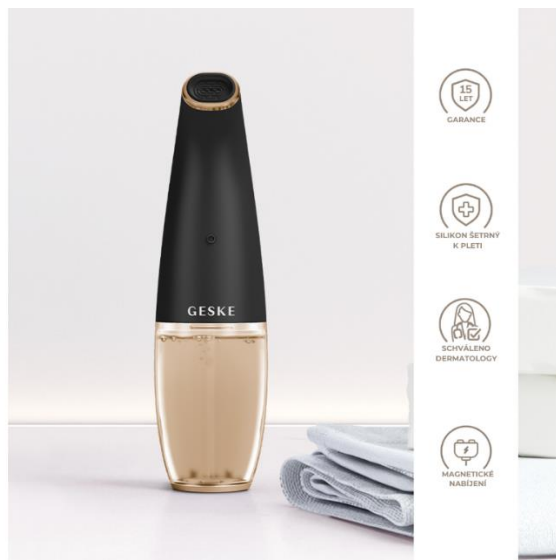

Použití přístroje

1. Čistý roztok
2. Použitý roztok




- 1) Naplňte nádržku vodou nebo roztokem Aqua-Stream od GESKE. Přístroj vždy držte během používání svisle, jinak se vypne. Pípající zvuk vás upozorní, pokud se tak začne dít.
- 2) Přístroj je dodáván se třemi nástavci: Menší nástavec je ideální pro čištění nosu a větší nástavec je určen pro větší oblasti, jako jsou tváře a brada. Třetí nástavec je pro proplachování přístroje.
- 3) Připojte proplachovací nástavec k přístroji a aktivujte technologii Aqua-Stream, abyste propláchli všechny zbytky z trubiček. Nastříkejte na přístroj GESKE organický čisticí prostředek pro dokonalé vyčištění (případně desinfekci pro nástroje).

Tělo přístroje

Sací hubice | Zapnutí, vypnutí | Nádržka na vodu

Doba nabíjení 2 hodiny

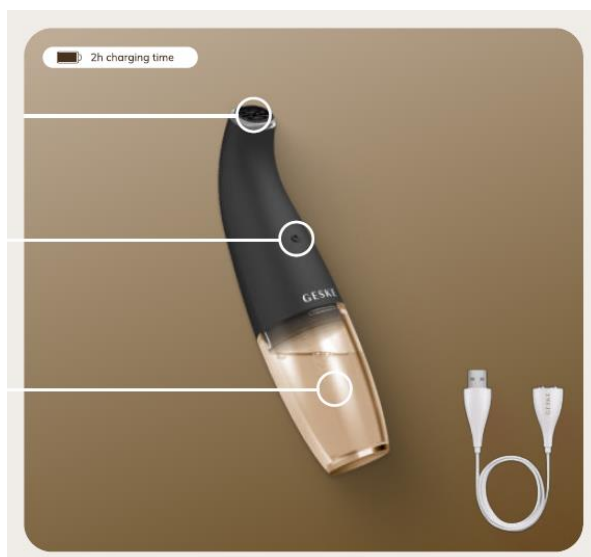

Nástavce

Různé nástavce: nos | obličej | proplachování

Menší nástavec je ideální pro čištění nosu a větší nástavec je určen pro větší oblasti, jako jsou tváře a brada. Třetí nástavec je pro proplachování přístroje.



Jednotlivé kroky při používání přístroje

SmartAppGuided™ Aqua-Stream Hydrodermabraze8v1 vás zbaví mdlého vzhledu pleti způsobeného nečistotami díky exfoliační technologii Aqua-Stream, která jemně čistí vaše póry.



Kompletní čištění obličeje

Příprava: Odstraňte kryt přístroje a naplňte nádržku 12 ml našeho roztoku Aqua-Stream nebo vody. Nádržku vraťte zpět do přístroje a znovu nasuňte kryt.

Zapnutí: Podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, aby se aktivovala exfoliační technologie Aqua-Stream. Stisknutím tlačítka procházejte intenzitami a vyberte si požadované nastavení.

Čištění: Přístroj držte svisle a pohybujte jím po bradě, tvářích a čele. Ujistěte se, že je přístroj neustále v pohybu. Opakujte na druhé straně obličeje. Poté použijte menší nástavec pro vyčištění nosu a okolních oblastí.

Dokončení: Vypněte přístroj podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund a vyprázdněte nádržku. Opláchněte víčko a nádržku. Desinfikujte GESKE organickým čisticím prostředkem nebo desinfekcí na přístroje v případě použití v beauty salonu. Části nechte volně uschnout.

Oblasti čištění

Brada: Umístěte přístroj na spodní část brady a pohybujte jím směrem ven a nahoru podél čelisti až k uchu. Opakujte.

Čelist: Umístěte přístroj pod bradu a pohybujte jím směrem ven pod čelistí. Vraťte se k bradě a proveďte další tah pod předchozím.

Nos: Pohybujte přístrojem dolů po nosu a do obtížněji dostupných oblastí kolem nosu. Ujistěte se, že nevynecháte žádný záhyb.

Čelo: Přesuňte přístroj k vnitřnímu rohu obočí. Pohybujte přístrojem směrem ven podél obočí až ke spánkům. Opakujte.